

Návod k použití chodítka A134110-453





Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití! Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž nebo nesprávné použití válečku.

Rozsah dodávky




1 x předem sestavený chodítko

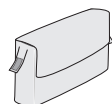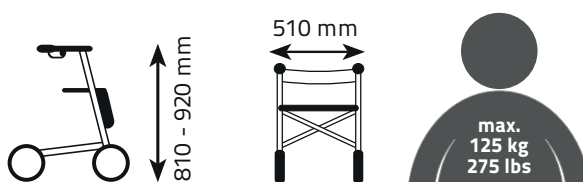

1 x látkový taška
(Max. Obsah: 9 l, max. Zatížení: 5 kg)



1 x zadní popruh

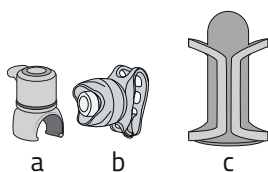

1 x zvon (a)
1 x LED světlo (b)
1 x držák na pohár (c)



1 x návod k montáži a použití

Technické specifikace:

Objednací číslo: A134110-453

Model: Chodítko Comfort Plus, černý, včetně zvonku, držáku na hůl, držáku na pohár a LED

Největší rozměry pro nastavení (ŠxVxH): přibližně 510 x 930 x 750 mm

Nejmenší skládací velikost (ŠxVxH, příslušenství odstraněno): přibližně 210 x 850 x 500 mm

Hmotnost chodítka: přibližně 8 kg

Max. Váha uživatele: 125 kg

Max. Nosnost koše: 5 kg

Výška sedáku: cca 540 mm

Sedadlo: cca 450 x 250 mm

Výška držadla: cca 810 - 920 mm

i UPOZORNĚNÍ!

Opatrně otevřete obal, aby nedošlo k poškození výrobku. Zkontrolujte úplnost a neporušenost celého obsahu. Pokud zjistíte jakékoli závady, obraťte se na uvedenou servisní adresu.




1. Zvonek
2. Rukojeť
3. Zádový pás
4. Ruční brzda
5. Držák na vycházkovou hůl
6. Rám (brzdová lanka umístěná uvnitř)
7. Led osvětlení
8. Sedadlo
9. Stahovací šňůrka na složení
10. Látková taška
11. Otočné kolečko s odrazkami
12. Držák na pohár
13. Tlačítko pro nastavení výšky
14. Pomůcka pro vyklápění
15. Zadní kolo s brzdou

i UPOZORNĚNÍ!

Pokyny ke stabilitě:

Pomůcka při chůzi může poskytnout podporu až do individuální hmotnosti 125 kg, včetně plnění taška. Košík lze naplnit maximálně 5 kg.

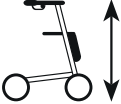 VAROVÁNÍ!	Varování, nebezpečí! Nedodržení tohoto nebezpečí může mít za následek těžká zranění nebo smrt.
 POZOR!	Pozor, nebezpečí! Nedodržení tohoto nebezpečí může vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.
 UPOZORNĚNÍ!	Varování před možnými škodami na majetku
	Min. a max. výška chodítka
	Max. šířka chodítka
	Max. hmotnost uživatele
	Lze použít uvnitř i venku
	Následuj instrukce!
	Distributora
	Datum výroby
	Prohlášení o shodě (shoda CE)
	Lékařský výrobek
	Varování před poraněním ruky
	Likvidace obalu
	Likvidace starého zařízení (LED lampa)
	Likvidace baterií
2 roky	Implicitní záruky

Bezpečnostní instrukce

VAROVÁNÍ!

- Výrobek není určen k použití osobami s tělesným nebo smyslovým postižením mentální schopnosti. Nesmí být použit z důvodu nedostatku znalostí nebo zkušeností, pokud nebyl výrobek instruován k vysvětlení rizik a na dotyčné osoby dohlíží supervizor.
- Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je nutné hlásit výrobci a příslušnému úřadu.
- Tato pomůcka při chůzi není hračka! Nenechávejte děti bez dozoru.
- Nepoužívejte chodítko pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných látek, které na vás působí fyzické a duševní znalosti a motorické dovednosti.
- Všechny pneumatiky musí být v neustálém kontaktu se zemí. To zaručuje správné vyrovnání pomůcky pro chůzi. Nepoužívejte proto chodítko na nerovném povrchu, jako je písek nebo štěr. Zvláštní pozornost věnujte také nerovným podlahám, jako např. B. kryty šachet. Pokud je to možné, nešplhejte po něm, protože by se kola mohla zaseknout ve vybráních.
- Nepoužívejte chodítko na ledu a sněhu nebo na velmi mokřích površích. Kluzké povrchy výrazně zhoršují protiskluzové vlastnosti kol.
- Nepoužívejte pomůcku při chůzi za špatné viditelnosti (např. V mlze nebo v noci).
- Při používání zařízení venku používejte pouze chodník, kdykoli je to možné. Noste poutavé oblečení a ideálně další odrazky. V případě potřeby zapněte LED světlo.
- Nepoužívejte zařízení na schodech nebo eskalátorech.
- Vždy přepravujte položky v tašce, který je pro ně určen. Dávejte pozor na maximální hmotnost a maximální kapacitu.
- Nepoužívejte chodítko jako vozidlo, pokud na něm sedíte. Před použitím musí sedačka zatažená parkovací brzda.
- Při nastavování výšky rukojeti se ujistěte, že jste při používání pomůcky pro chůzi ve správné vzpřímené poloze. Abyste se vyhnuli špatnému držení těla, nechte si doučit od lékaře a rehabilitačního odborníka.
- Zkontrolujte, zda jsou držadla na obou stranách nastavena ve stejné výšce a zda jsou šrouby pevně utaženy.
- Před každým použitím zkontrolujte funkci brzd a ujistěte se, že boční trubky a sedadlo jsou řádně spojena.
- Pravidelně kontrolujte, zda není pomůcka pro chůzi poškozená a opotřebovaná. Vadné součásti nechte okamžitě vyměnit a chodítko nepoužívejte, dokud nebude zcela opraveno. Neprovádějte na produktu žádné změny.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený!
- Vždy dodržujte maximální meze zatížení pomůcek pro chůzi a příslušenství. Nikdy nepřekračujte tento limit, jinak nelze plně zaručit funkci a stabilitu produktu.
- Na chodítko nelezte a nikdy jej nepoužívejte jako pomůcku při lezení!
- Protože je pomůcka pro chůzi vybavena funkcí skládání, existuje vždy, a zejména při jejím skládání nahoru a dolů, riziko přimáčknutí nebo zachycení. Vždy dávejte pozor, abyste si

nepřiskřípli prsty nebo ruku.

- Nebezpečí popálení! Nevystavujte chodítka přímému slunečnímu světlu ani jiným extrémním zdrojům tepla, protože materiál se může rychle zahřát.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny pro LED světlo s bateriemi

VAROVÁNÍ!

LED světlo

- Světelný zdroj tohoto LED světla není vyměnitelný. Pokud je vadný, celé svítidlo bylo vyměněno a vadné svítidlo řádně zlikvidováno.
- Nikdy nevyměňujte lampu sami!
- Světlo používejte, pouze pokud je správně připevněno k pomůckám pro chůzi.
- LED světlo lze použít pouze na pomůcku pro chůzi, která je k tomu určena, a nesmí být použito k jiným účelům, než ke kterým bylo určeno.
- Chraňte lampu před pádem a nevystavujte ji mechanickému tlaku.
- Ve světelném kuželu LED nikdy nepoužívejte lupy nebo brýle s vysokým optickým zvětšením. **Nebezpečí ohně!**
- Nedívejte se přímo do světla lampy.

VAROVÁNÍ!

Baterie

- Vyjměte baterie ze světla, jakmile jsou vybité nebo když je používáte nepoužívejte dlouhodobě.
- Varování: Vždy uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Nenabíjejte, neaktivujte ani nezkratujte baterie.
- Nikdy neotvírejte baterii!
- Nepoužívejte poškozené baterie!
- Nezahřívejte baterie! Nebezpečí výbuchu!
- Buďte opatrní s vyteklými bateriemi: Okamžitě je zlikvidujte podle předpisů.
Chraňte svou pokožku před unikající kyselinou.
- Pokud se kyselina dostane do styku s vaší pokožkou, důkladně omyjte postižené místo vodou a mýdlo. Pokud se kyselina z baterie dostane do očí, důkladně ji vypláchněte vodou a okamžitě navštivte lékaře.

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Požití Baterie mohou způsobit rozsáhlé poškození zdraví a dokonce vést ke smrti. V případě spolknutí nebo jiného vložení baterie do těla okamžitě vyhledejte lékaře.
- Při vkládání baterií vždy dávejte pozor na polaritu.
- Vždy používejte baterie stejného typu. Nikdy nemíchejte nové a staré Baterie.

Účel a funkce

Konstrukční řešení Rollator Comfort Plus podporuje uživatele při pohybu z hlediska stability a rovnováhy. To zlepšuje individuální pohyblivost, kompenzuje nejistou chůzi a zabraňuje pádům. Slouží jako pomůcka při chůzi pro osoby s omezenou pohyblivostí do maximální tělesné hmotnosti 125 kg.

Rolátor je určen pouze pro soukromé použití a není určen pro komerční použití.

Rolátor je určen pro vnitřní i venkovní použití.

Navíc nabízí sedátko, které působí proti vyčerpání způsobenému námahou při chůzi.

Rolátor je určen pro použití na pevném a rovném terénu. Použití na ledu, sněhu a mokrému povrchu je zakázáno.

Indikace

Použití Rollator Comfort Plus je vhodné pro:

- Obtížná chůze v důsledku omezení aktivního nebo pasivního pohybu přístrojů
- Potíže s koordinací v průběžné fázi
- snížená odolnost

Kontraindikace

Použití Rollator Comfort Plus není vhodné pro:

- Poruchy vnímání
- těžké poruchy rovnováhy
- hmotnost uživatele vyšší než 125 kg

Zamýšlené použití

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování v návodu k montáži a obsluze. Rolovač podporuje uživatele při přepravě předmětů v látkovém vaku určeném k tomuto účelu. Látkový pytel má objem cca 9 litrů a lze jej zatížit maximálně 5 kg. Používejte rolátor pouze tak, jak je popsáno v uživatelské příručce.

Pro lepší viditelnost slouží LED světlo. Nepředstavuje osvětlení ve smyslu pravidel silničního provozu.

Doporučená životnost rolátoru je maximálně 5 let. (tato informace předpokládá dodržování zamýšlených pokynů pro manipulaci, péči a bezpečnost).

Úložný prostor:

Pro skladování by parkovací brzda měla být vždy aktivována. Chodítko skladujte na suchém místě při pokojové teplotě (přibližně 20 ° C). Chraňte jej před mrazem, přímým slunečním zářením nebo jinými povětrnostními vlivy. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Čištění a péče:

Dodržujte pokyny k čištění a péči. Nesprávná obsluha může produkt poškodit.

Chodítko opatrně očištěte vodou a běžným čisticím prostředkem. Poté produkt osušte hadříkem.

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky a vždy dbejte na to, abyste nevystavovali chodítko proudu tvrdé vody (např. Vysokotlakým čističem), protože by mohlo dojít k poškození malých částí nebo povrchu výrobku.

Údržba:

Před každým použitím zkontrolujte funkčnost chodítka.

Následující díly vyžadují vaši zvláštní pozornost:

- Brzdy
- Kola
- Šroubové spoje
- Celkový vzhled produktu
- Zámky

Likvidace chodítka

Produkt zlikvidujte v souladu s platnými předpisy prostřednictvím schválené společnosti pro likvidaci odpadu nebo v komunálním zařízení pro likvidaci odpadu. V případě potřeby se informujte o správné a ekologické likvidaci.

**Likvidace obalu:**

Obaly zlikvidujte ekologicky. Ujistěte se, že jste správně separovali odpad.

**Likvidace elektrických součástek (LED světla):**

Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat elektrická zařízení odděleně od domácího odpadu prostřednictvím schválené likvidační firmy pro elektrická zařízení, aby nedošlo k poškození životního prostředí. Před likvidací předmětu vyjměte baterie a zlikvidujte je odděleně.

**Likvidace baterií:**

Baterie se nesmějí dostat do domácího odpadu! Spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdat je na příslušném sběrném místě nebo u prodejce, aby bylo možné provést ekologickou likvidaci.

Uvedení do provozu




POZOR!


Nebezpečí úrazu zachycením během celé montáže!

Chodítko je dodávána složená.


Rozvinout Chodítko:

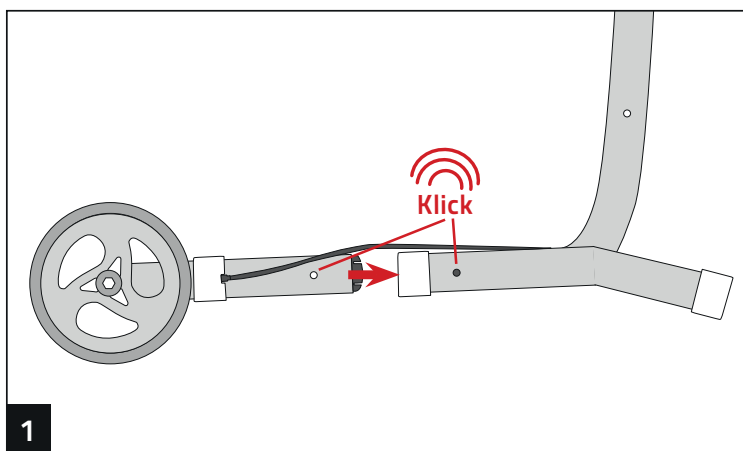


1 Přesuňte vzpěry zadních kol do správné polohy, a poté stiskněte dvě tlačítka po stranách vozu, na bocích vzpěry tak, aby se vzpěra zasunula do otvoru otvoru v rámu.

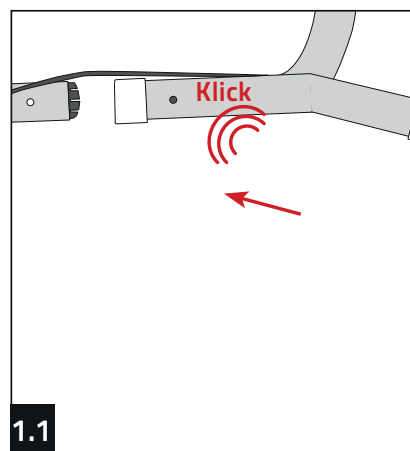

1.1 Opakujte tento postup s předními koly, zatímco sledujete značení (R) a (L) na vzpěrách.

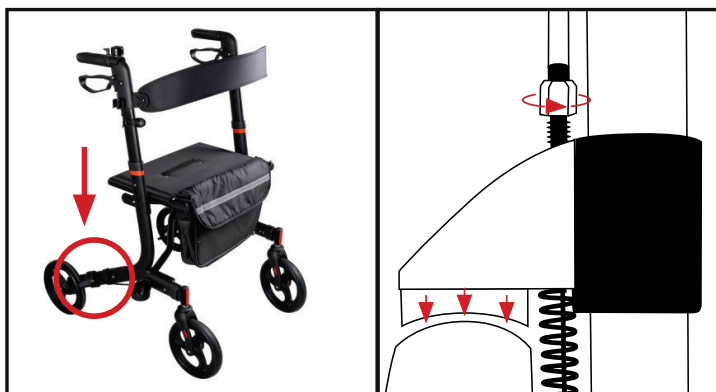


Otočte doprava a dotáhněte brzdové destičky. Otočením doleva brzdové destičky povolíte.

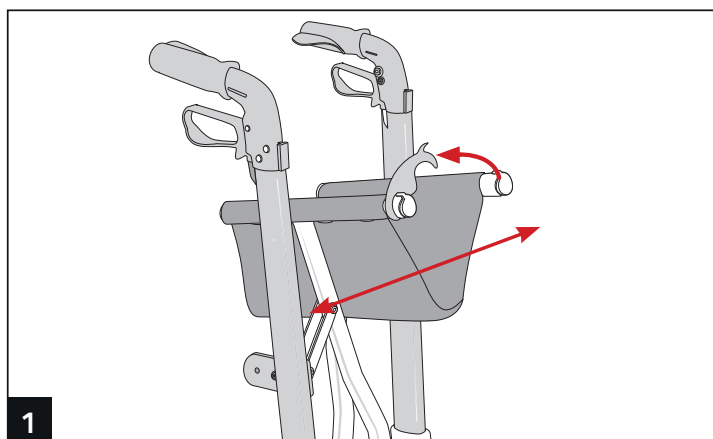


1

1 Rolák co nejvíce rozložte.

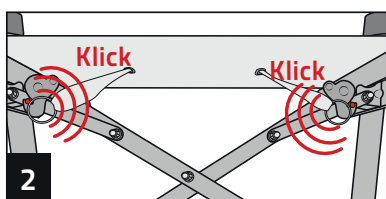


2

2 Držáky pod sedadlem musí zapadnout do malých vzpěr na rámu.

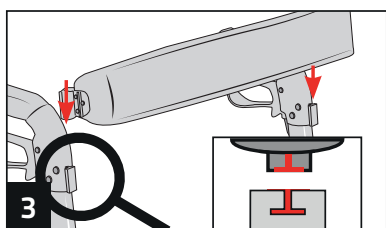

3


3 Nyní zatlačte zadní popruh shora na zařízení na rukojetích, dokud nejsou na doraz.

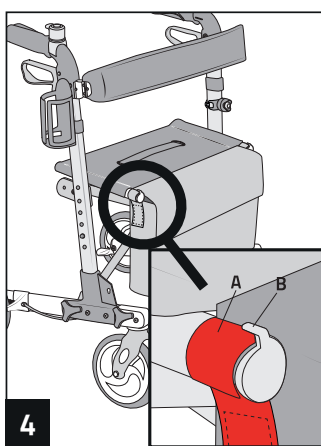

4


4 Očka (A) jsou připevněna na pravé a levé straně tašky. Umístěte očka brašny (A) vlevo a vpravo přes boční trubky sedačky a poté zahákněte poutko do bodce (B) připevněného k trubce, abyste zabránili vyklouznutí brašny.

Namontujte zvonek:

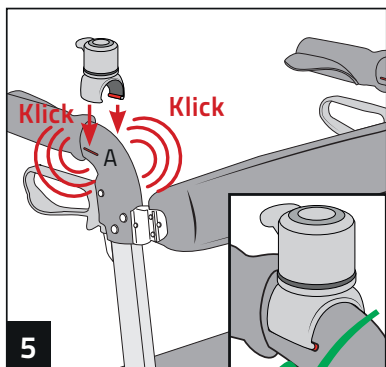

5

5 Připevněte zvonek k jedné z rukojetí, podle toho, zda jste pravák nebo levák. Na levé a pravé straně obou rukojetí jsou vybrání (A), do kterých se musí rám zvonku zasunout. Ty zajišťují bezpečné uchycení zvonku na rukojeti. Namontujte zvonek tak, abyste jej mohli stisknout palcem.

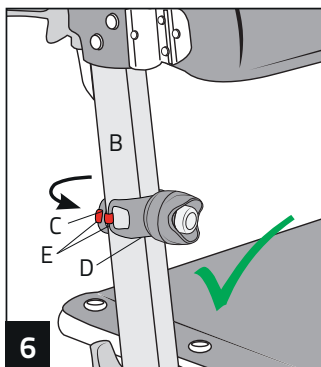

6


Montáž LED lampy:



VAROVÁNÍ!

Používejte pouze světlo na rolátoru. LED světlo slouží ke zviditelnění rolátoru pro ostatní účastníky silničního provozu, ale pouze v omezené míře k prosvětlení prostředí.

7 Připevněte LED světlo k libovolné hliníkové trubce rukojetí rolátoru (B). Ujistěte se, že světlo je viditelné pro protijedoucí vozidla nebo chodce. Vytáhněte dlouhou stranu gumičky (C) dostatečně daleko, aby se dala natáhnout kolem hliníkové trubky (B) a zaháknout do háčku (E) na krátké straně gumičky (D).

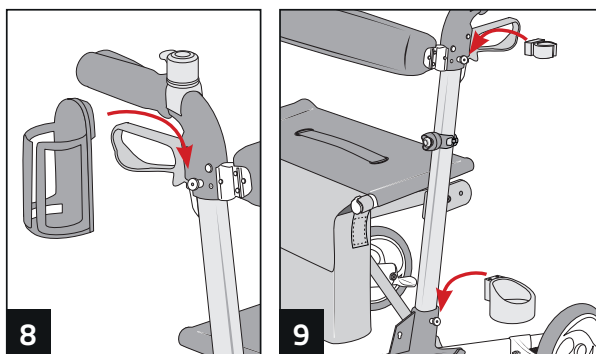**Sestavte držák nápojů:**

8 Vložte držák nápojů do šablony pravé rukojeti a zatlačte jej až na doraz. Pak to můžete použít.

Sestavte držák tyče:

9 Nasad'te odkapávací misku do určeného háčku na spodní části levé tyče a přichytku dřívku rukojeti na horní část levé rukojeti.

Nastavte výšku rukojeti:**i UPOZORNĚNÍ!**



Výšku rukojeti rolátoru lze nastavit v 6 krocích pomocí aretačních knoflíků. Zaujměte vzpřímenou, ale pohodlnou polohu a nechte ruce volně viset. V této poloze by vaše ruce měly být schopny uchopit rukojeti rolátoru ■.

**! VAROVÁNÍ!**

Nesprávné nastavení výšky rukojeti může vést ke špatnému držení těla a dalším zraněním **2** + **3**. Používejte rolátor pouze se správnou výškou rukojeti.



Ujistěte se, že jsou obě rukojeti zajištěny ve stejné výšce. Stisknutím tlačítka uvolníte rukojet' a zajistíte ji v pohodlné výšce. Rukojet' musí zaklapnout na místo ve stejné výšce na obou stranách. Mějte na paměti, že rukojet' musí být vždy správně zajištěna v jedné ze 6 dodaných výšek **4**.

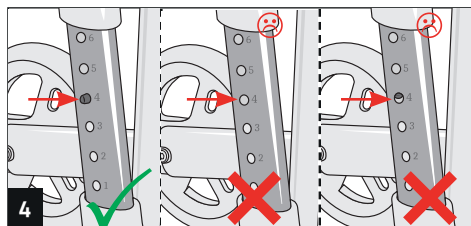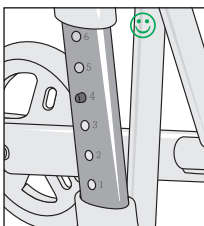**Dobré každodenní použití:****! VAROVÁNÍ!**

Pro lepší podporu držte rolátor blízko těla. Jen tak je zaručena bezpečná chůze. Pokud umístíte rolátor příliš daleko od těla, může se snadno odkutálet a nemusíte být správně podepřeni.


**Použití LED světla:**

Stiskněte průhledný okraj lampy pro ovládání LED lampy. Vyberte si z různých režimů stisknutím ikony:


- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. neustále svítí | 3. pomalu bliká |
| 2. rychlé blikání | 4. ven |

Aktivace brzd:**! VAROVÁNÍ!**

Vždy používejte pravou a levou brzdu současně, aby se nerovnoměrně neopotřebovaly. Před každým použitím zkontrolujte správné nastavení a funkčnost brzd. Před použitím sedadla musí být parkovací brzda vždy aktivována. Přestaňte používat chodítko, pokud již nelze brzdy správně nastavit. Brzdy je nutné čas od času znovu seřídit kvůli opotřebení. Pokud se brzdový účinek snižuje nebo je nerovnoměrný, musíte brzdy znovu utáhnout.

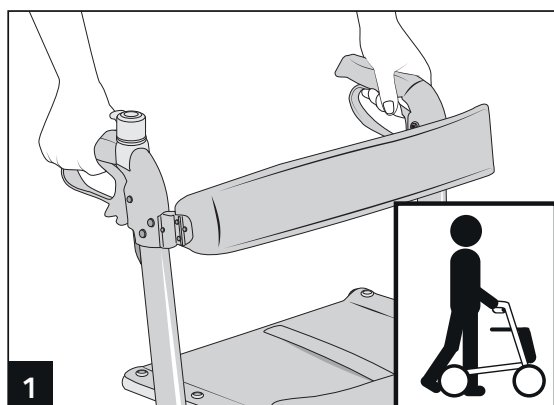**1 Ruční brzda (při chůzi)**

Zatáhněte obě brzdové páky směrem nahoru k řídkům současně a se stejnou intenzitou. Chcete-li ji uvolnit, jednoduše ji znovu uvolněte. Čím více zatáhnete, tím větší bude brzdná síla. Pokud je brzdový výkon i přes silné zatažení příliš nízký, bude pravděpodobně nutné brzdu seřídit.

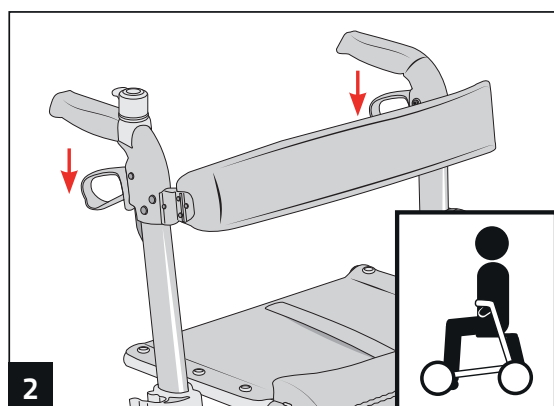**2 Parkovací brzda (v sedě)**

Zatlačte obě brzdové páky dolů, dokud nezapadnou a již nezaklapnou zpět. Teprve poté jsou kola upevněna a chodítko se již nemůže odkutálet. Chcete-li ji uvolnit, jednoduše ji zatáhněte zpět do střední polohy malým tlakem.

Použití sedačky:**! POZOR!**


Sedačku používejte pouze se zapnutou parkovací brzdou. Při používání sedačky se nenechte tlačit. Také netlačte na jiné lidi. Hrozí pád! Sedačku smí používat vždy pouze jedna osoba. Nepoužívejte válec, pokud je povrch kluzký nebo kluzký.

Výměna baterií v LED diodách:


2x lithiová knoflíková baterie CR 2032, po 3V

⚠ VAROVÁNÍ!


Dodržujte bezpečnostní pokyny pro LED světla a baterie!

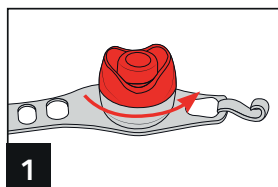


1 Vyjměte LED světlo z rolátoru. Otočte horní částí krytu LED ve směru hodinových ručiček, aby se uvolnila, a vyjměte ji.

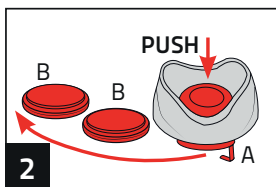




2 Nyní vysuňte světlo (A) z pouzdra a vyjměte dvě baterie (B). Dbejte na odbornou likvidaci.

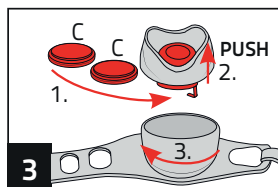

3. 1. Vložte nové Baterie (C). Dávejte pozor na polaritu. 2. Poté vložte lampu zpět do pouzdra a 3. zavřete to.

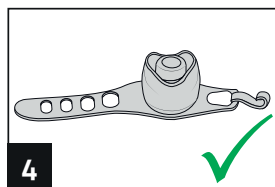


4 Nyní můžete světlo opět připevnit k rolátoru, jak je popsáno.

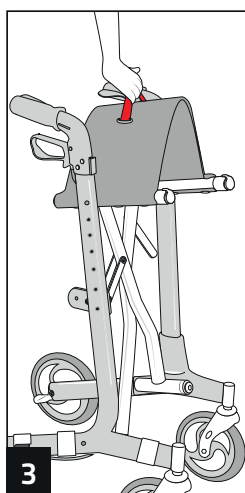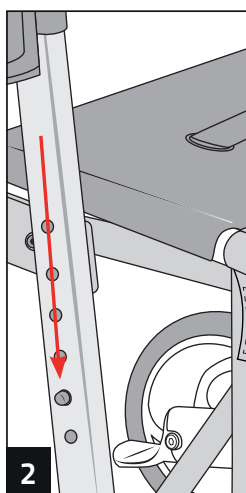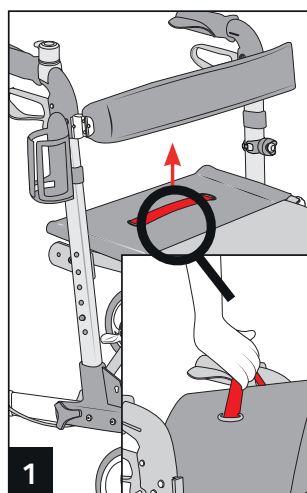Skládací kolečkové křeslo:

1 Vytáhněte sedadlo za rukojeť nahoru, aby se uvolnilo z držáku a rolovací vozík se smrskl. Poté jej zajistěte pomocí svorky na trubkách sedadla.

2 V případě potřeby nastavte výšku rukojeti na nejnižší úroveň, abyste ušetřili ještě více místa.

3 Převrta složený vozík pomocí rukojeti

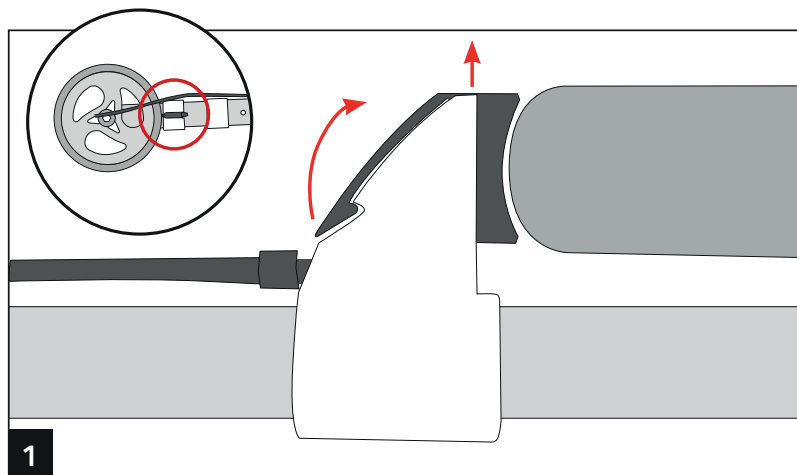Austausch Bremsblock:

1 Zatáhněte za záložku (16) směrem nahoru, aby se uvolnila uvolněte ji z ukotvení. Poté zatáhněte za jazýček směrem dozadu a vyjměte celý brzdový špalík. Celý brzdový špalík.

2 Zcela zasuněte nový brzdový špalík do držáku, dokud nezacvakne.